

Sådan gør du

For det bedste resultat, læs hele instruktionen nøje igennem før du starter behandlingen.

1. Form tandskinnen ved at dyppe den

i ca 80° varmt vand i 3 sekunder, til den begynder at krympe. Slå vandet af og tag skinnen i munden (du vil ikke brænde dig). Tryk med fingrene og brug tungen til at forme skinnen efter dine tænder. Sug samtidigt luften ud. Er du ikke tilfreds gentag proceduren med den samme skinne. Skyl skinnen i koldt vand. En ekstra skinne er inkluderet, hvis du fejler.



Klip flappen af.

2. Børst tænderne let uden tandpasta før hver behandling.



3. Læg en tynd strøg gel i tandskinnen, fra kant til kant.

Placer derefter tandskinnen på den tandrække som skal bleges. Begge tandrækker kan bleges samtidigt.



4. Lad det virke i 15 minutter.



5. Spyt ud og skyl med vand. Børst derefter let uden tandpasta.

6. Gentag behandlingen en gang pr dag i 10 dage, eller til du er tilfreds med resultatet. Produktet må anvendes i op til 20 dage i en 3 måneders periode. Læg ikke et for tykt lag blegningsgel i tandskinnen, cirka 0,5 ml rækker pr behandling. Gelsprøjten rækker da til 10 behandlinger.*

Sikkerhedsanvisninger

Ved unormalt indtag, kontakt alarmcentralen 112 og oplys pakkens indhold. Afbryd behandling ved irritation af tandkøddet. Anvend ikke produktet hvis du lider af irriteret eller betændt tandkød, har tandbøjle, har blødende tandkød, har blottede tandhalse eller hvis du er allergisk for nogle af de virksomme stoffer. Opbevar produkterne tørt og køligt.

For det bedste resultat, læs hele instruktionen nøje igennem før du starter behandlingen.

Antal behandlinger som kræves inden det ønskede resultat er individuelt. Resultatet varierer afhængig af tændernes misfarvninger samt genetiske forudsætninger. Bemærk at kroner, plomber og andre tandarbejder ikke bliver bleget. Små hvide pletter kan ses på tænderne lige efter blegning. Det er normalt og pletterne forsvinder i løbet af 4-6 timer. Gentag behandlinger indtil det ønskede resultat er opnået. Vi anbefaler at hele behandlingen gennemføres. Ved behov findes tandblegningsgel som refill.

Generelle anbefalinger

- Undgå juice, te, kaffe og andre farvende drikke i op til fire timer efter behandling.
- Tandblegning anbefales ikke til personer under 18 år.
- Hvis du er gravid eller ammer, rådfør dig med din læge inden behandling.
- Opbevar alle tandblegningsprodukter og tilbehør utilgængeligt for børn og dyr.

Opbevaring

- Når sprøjten er åbnet, er udløbsdatoen 1 år.
- Opbevares bedst i køleskab.

Eventuelle bivirkninger

Ingen kendte bivirkninger er rapporteret.

Flere produkter til dit hvide smil

For mere information om alle vore produkter til et hvidere smil og en friskere følelse, besøg simplesmile.no eller simplesmile.dk. Ved spørgsmål, kontakt Kundeservice via e-mail info@simplesmile.se

SimpleSmile®-produkterne er ikke testet på dyr.



simplesmile.dk
simplesmile.no

Toimi näin

Parhaan lopputuloksen saavuttaaksesi, lue koko käyttöohje huolellisesti ennen käsittelyn aloittamista.

1. Muotoile hammasmuotti uppottamalla se 80°veteen 3 sekunnin ajaksi. Ravista vesi pois ja aseta muotti suuhun (muotti ei ole niin kuuma, että poltat itsesi). Muotoile sormia ja kieltä käyttäen muotti hampaillesi sopivaksi. Ime samalla ilma ulos muotista. Jos et ole tulokseen tyytyväinen, toista toimenpide. Huuhtelee lopuksi muotti kylmällä vedellä.



LEIKKAA MUOTIN PIDIKE POIS


2. Harjaa hampaat aina kevyesti ilman hammas-tahnaa ennen jokaista käsittelykertaa.



3. Laita geeliä ohuena nauhana hammasmuotin koko pituudelle. Aseta sen jälkeen muotti valkaisu-tavien hampaiden päälle. Molemmat hammasrivit voidaan valkaista samanaikaisesti.



4. Anna vaikuttaa 15 minuuttia

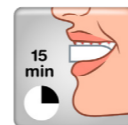

5. Poista muotti, sylje valkaisuaine pois ja huuhtelee suu vedellä. Harjaa hampaat kevyesti ilman hammas-tahnaa.

6. Toista käsittely kerran päivässä 10 päivän ajan, tai kunnes olet tyytyväinen tulokseen. Tuotetta voi käyttää maks. 20 päivää kolmen kuukauden aikana. Älä laita liian paksua kerrosta valkaisu-geeliä hammasmuottiin, noin 0,5 ml per käsittely riittää. Geeliruiskun sisältö riittää näin 10 käsittelykertaan.

Skannaa QR-koodi katsoaksesi videokoulutusta siitä, miten saada parhaita Muotoile suorasiasat.



Varoitukset

Mahdollisten myrkytysoireiden ilmaantuessa ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen (puh 09 4711) tai hätäkeskukseen (puh 112) ja kerro pakkauksen tuoteselosteen sisältö. Keskeytä käsittely mikäli ikenet artyvät. Älä käytä tuotetta mikäli sinulla on tulehtuneet tai ärsyyntyneet ikenet, hammasraudat, verta vuotavat ikenet tai jos olet allerginen jollekin tuotteen vaikuttavalle aineelle. Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa.

Onnistunut tulos

Tarvittavien käsittelyiden määrä on yksilöllistä ja tulos vaihtelee riippuen hampaiden värjäytymien määrästä ja perinnöllisistä tekijöistä. Huomioi, että hammaskuoret, paikat ja muut hammastyöt eivät valkaistu. Pieniä valkoisia läikkiä voi näkyä hampaissa heti valkaisun jälkeen. Tämä on normaalia ja läikät häviävät 4-6 tunnin kuluessa.

Uusi käsittely, kunnes olet saavuttanut toivomasi tuloksen. Suosittelemme koko käsittelyn loppuun viemistä. Tarvittaessa voit tilata täydennyspakkauksen valkaisu-geeliä.

Yleiset suositukset

- Vältä mehua, kahvia, teetä ja muita värjäviä juomia 4 tuntia valkaisun jälkeen.
- Valkaisua ei suositella alle 18 vuotiaalle.
- Jos olet raskaana tai imetät, keskustele lääkärin kanssa ennen käsittelyn aloittamista.
- Säilytä tuotteita lasten ja eläinten ulottumattomissa.

Säilyttäminen

- Avattuaan ruiskun viimeinen käyttöpäivämäärä on 1 vuosi.
- Paras säilytetään jääkaapissa.

Mahdolliset haittavaikutukset

Ei raportoituja haittavaikutuksia.

Lisää tuotteita valkoisempaan hymyyn

Lisätietoja kaikista tuotteistamme valkoisempaan hymyyn ja raikkaampaan tunteeseen löydät internetistä: simplesmile.fi Kysymyksiä voit lähettää sähköpostitse: info@simplesmile.se

SimpleSmile®-tuotteita ei testata eläimillä.



simplesmile.fi

SIMPLESMILE®

Professional teeth whitening

Teeth Whitening X4

EXPERT KIT

INSTRUCTIONS

SÅ GÖR DU

SÅDAN GÖR DU

TOIMI NÄIN

Instructions

For best results, read instructions carefully before use.

Step 1. Shape the mouth tray. Hold the tray by the tab and dip into water at a temperature of 80 °C for 2–3 seconds until it is malleable. Do not submerge the tab and be careful, keeping fingers out of the water at all times. Shake the tray to remove the remaining water, then carefully and quickly place the tray into the mouth on the upper or lower set of teeth (this will not burn you). Use your fingers and tongue to mould the tray to your teeth. Close your mouth and suck the air and moisture out, helping to provide a better impression of your teeth. Keep the tray in for 30 seconds.

If you are not satisfied, repeat the procedure with the same tray.

Once you are happy with the fit of the tray, rinse with cold water and remove the tab with a pair of scissors. If you are not happy with the result, there is an extra mouth tray with.

Step 2. Brush your teeth gently without toothpaste before each treatment.

Step 3. Using the syringe, apply a small line of gel to the mouth tray (approximately 0.5 ml) from one end to the other.

Step 4. Leave on your teeth for 15 minutes.

Step 5. Spit out and rinse with water. Brush your teeth **without toothpaste**.

Step 6. Repeat the treatment once a day for 10 days or until you are satisfied with the results. The product can be used for up to 20 days over a three-month period. Do not apply too much gel to the mouth tray, about 0.5 ml per treatment is sufficient. The syringe will then last for 10 treatments.

Scan the QR code to watch Video Tutorial on how to best shape the mouth trays.



Safety Instructions

If a large amount of gel is accidentally ingested, visit A&E immediately. If gel gets into your eyes, rinse with water immediately.

Do not use if you suffer from irritated or inflamed gums, bleeding gums, oral infections, tooth decay, gum disease, if you are allergic to any of the ingredients or wear braces. You should allow your mouth and gums to heal before any teeth whitening treatment in order to refrain from irritating the wound / infection. If your oral infections persist you should visit the dentist.

If irritation occurs, stop using the treatment.

For the best Results

The number of treatments required for the desired results are different from person to person. Teeth are unique and will be whitened back to the natural white tooth shade of the individual.

Repeat the treatment until desired results are achieved. We recommend that the treatment is completed. Results vary depending upon tooth discolouration and genetic conditions.

Small white spots may appear on your teeth, don't be alarmed, this will soon disappear.

Please Note: fillings, veneers and other dental work will not be whitened as SimpleSmile® products are designed to whiten only the natural tooth enamel.

General Recommendations

- Avoid tea and coffee and coloured drinks for four hours after treatment.
- Teeth whitening is not recommended for persons under 18 years old.
- If you are pregnant or breastfeeding consult your doctor before starting treatment.
- Keep all teeth whitening products out of reach from children and animals.

Storage

- Once opened, the expiry date of the syringe is 1 year.
- Best stored in refrigerator.
- Store the trays at room temperature and away from direct sunlight in order to retain the shape.

Side Effects

There are currently no known side effects to SimpleSmile® teeth whitening and oral care products. SimpleSmile® products have been tried and tested and are produced in an FDA approved laboratory.

More products for a white smile

For more information about SimpleSmile® products visit www.simplesmile.co.uk

SimpleSmile® products are not tested on animals.



Så gör du

För bästa resultat, läs hela instruktionen noga innan du startar behandlingen.

1. Forma munskenan genom att doppa den i ca 80° vatten i 2–3 sekunder, till den börjar krympa. Skaka av vattnet och stoppa skenan i munnen (du kommer inte att bränna dig). Tryck med fingrarna och använd tungan för att forma skenan efter dina tänder. Sug samtidigt ut luften. Är du inte nöjd upprepar du proceduren med samma skena. Skölj skenan i kallt vatten. En extra skena finns med ifall du misslyckas.

KLIPP AV FLÄRPEN.

2. Borsta tänderna lätt utan tandkräm före varje behandling.


3. Lägg en tunn sträng gel i munskenan, från kant till kant. Placera därefter munskenan på den tandrad som ska blekas. Båda tandraderna kan blekas samtidigt.

4. Låt verka i 15 minuter.

5. Spotta ut och skölj med vatten. Borsta sedan lätt **utan tandkräm**.

6. Upprepa behandlingen en gång per dag i 10 dagar, eller tills du är nöjd med resultatet. Produkten kan användas upp till 20 dagar under en tremånadersperiod. Lägg inte för tjockt med blekningsgel i munskenan, cirka 0,5 ml per behandling räcker. Gelsprutan räcker då till 10 behandlingar.

Skanna QR-koden för att se en Video Tutorial hur du bäst formar munskena.

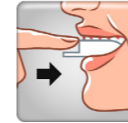

Varningsföreskrifter

Vid onormalt intag, kontakta giftcentralen 112 och ange förpackningens innehåll. Använd inte produkten om du lider av irriterat eller inflammerat tandkött, om du bär tandställning, har blödande tandkött eller om du är allergisk mot något av de verksamma ämnena. Förvara produkterna torrt och svalt.

För ett lyckat resultat

Antal behandlingar som krävs innan önskat resultat uppnås är individuellt. Resultatet varierar beroende på tändernas missfärgning samt genetiska förutsättningar. Observera att skalfasader, lagningar och andra tandarbeten inte kommer att blekas. Små vita fläckar kan synas på tänderna direkt efter blekning. Det är normalt och fläckarna försvinner inom 4–6 timmar.

Upprepa behandlingen tills önskat resultat är uppnått. Vi rekommenderar att hela behandlingen slutförs. Vid behov finns tandblekningsgel som refill.

Allmänna rekommendationer

- Undvik juice, te, kaffe och andra färgade drycker under fyra timmar efter behandling.
- Tandblekning rekommenderas ej för personer under 18 år.
- Om du är gravid eller ammar, rådgör med din läkare innan behandling.
- Förvara samtliga tandblekningsprodukter och tillbehör oåtkomligt för barn och djur.

Förvaring

- Hållbarhet räknas efter att förpackningen brutits vilket är 1 år.
- Förvara produkten i kylskåp för bästa hållbarhet.
- Förvara munskena i rumstemperatur och borta från direkt solljus för att behålla formen.

Eventuella biverkningar

Inga kända biverkningar är rapporterade. SimpleSmile®-produkter testas och produceras i ett FDA-godkänt laboratorium.

Fler produkter för ett vitt leende

För mer information om SimpleSmile®-produkter, besök www.simplesmile.se

SimpleSmile®-produkter testas inte på djur.



simplesmile.se

SIMPLESMILE®

www.simplesmile.com, se, dk, no, fi
Made in Sweden